

HeatPad+

■ Matelas chauffant de grand confort pour table de soin

Le HeatPad+, matelas chauffant 2 zones, est un équipement de confort destiné au kinésithérapeute et à l'esthéticienne. C'est une surface chauffante XL qui émet des rayons IRL (Infra Rouges Longs) de longueurs d'onde comprises entre 7 et 14 μm , puisque le corps humain émet des IFR de longueur d'ondes comprises entre 6 et 20 μm , les IRL émis par le HeatPad+ sont dits « bio-compatibles » : aussi efficaces qu'inoffensifs pour réchauffer le corps humain.

■ Outstandingly comfortable table warmer

The HeatPad+ 2 section table warmer is an investment for comfort, designed both for beauticians and kinesiologists.

This is a XL heating pad which emits FIR (Far Infra Red) rays of which wave lengths are from 7 μm to 14 μm ; since human body emits from 6 to 20 μm FIR rays, FIR rays emitted by the HeatPad+ table warmer are called bio-compatible : as efficient as harmless to warm human body.



Le HeatPad+ est tout à la fois :

- **un investissement de confort**

Le HeatPad+ est le premier matelas chauffant 2 zones au monde : une grande zone pour les fessiers et le dos, une petite zone pour les jambes ; chaque zone a 3 niveaux de température réglables, ce qui permet aux clients ayant des problèmes de circulation de régler la chaleur de la zone jambes à une température plus basse que celle des fessiers et du dos.

Quand l'esthéticienne fait un soin corps localisé ou un soin visage, le matelas chauffant permet à la cliente d'être totalement détendue et évite à la fois la sensation de froid et certaines douleurs cervicales dues à une position inhabituelle prolongée : la chaleur agit comme un remède contre les douleurs rhumatismales.

Quand le kiné masse le client d'un côté, le matelas chauffant chauffe l'autre côté ou garde chaud le côté déjà massé pendant qu'il masse l'autre côté.

- **un soin hygiénique**

Le HeatPad+, comme tous les appareils 3a beauté, bénéficie d'un traitement Bio-Prüf® : c'est un puissant traitement anti-fongique et anti-microbien intégré dans la masse de l'enveloppe extérieure du matelas chauffant qui lui confère une qualité hospitalière. A l'inverse des traitements de surface courants dont l'action est limitée dans le temps, le traitement Bio-Prüf® agit pendant toute la durée de vie du matelas chauffant en diffusant en permanence ses principes actifs ; pour mieux apprécier les effets du traitement Bio-Prüf®, se reporter à notre documentation Bio-Prüf®.

- **un appareil sûr**

Le HeatPad+ est étanche : il peut être nettoyé simplement à l'eau savonneuse (ne pas utiliser de solvant).

Le HeatPad+ est automatiquement temporisé à 60' : il ne peut pas chauffer toute une nuit en cas d'oubli...

Le HeatPad+ a une zone de sécurité dédiée au pliage entre la partie horizontale de la table et son dossier : il ne peut pas surchauffer à cet endroit ni endommager la table.

Caractéristiques techniques

- 2 zones :
 - grande zone pour buste et cuisses
 - petite zone pour jambes
- 3 niveaux de température réglables par zone
- zone de pliage dédiée à la charnière table/dossier
- temporisation automatique pour la sécurité
- traitement Bio-Prüf® : qualité hospitalière
- coloris : blanc/blanc ou chocolat/caramel
- grande taille : 1.80 x 0.59m
- tension : 230V ou 115V

Normes : EN60335-1 & EN60335-2-17



HeatPad+ is both :

- **comfort investment**

The HeatPad+ table warmer is the first one in the world with 2 sections : a large section for back and thighs, a small section for legs ; every section has 3 temperature level settings, as a result varicose people may set lower temperature in leg section than in back and thigh section.

While beautician is doing a body treatment or a face care, table warmer makes the client fully relaxed and avoids both coldness feeling and cervical pains due to unusual and long posture : heat acts as a medicine against rheumatic pains.

While kine is massaging one's client side, heating pad is warming the unmassaged side or keeps warm the already massaged side while massaging the other side.

- **hygienic care**


HeatPad+ table warmer is Bio-Prüf® treated : this is a powerful anti-microbial and anti-fungal agent which is integrated into the mass of the outside cover. Unlike current surface treatments, whose action is limited in time, Bio-Prüf® treatment acts throughout the life of the table warmer, distributing its active agents continuously. In order to know more about Bio-Prüf® treatment, please ask for our Bio-Prüf® brochure.

- **safe equipment**

HeatPad+ table warmer is watertight : you can clean it just with water and soap (do not use solvents).

HeatPad+ table warmer is 60' temporized : it cannot warm a whole night even you forget to turn it off.

HeatPad+ table warmer has a folding dedicated zone : it cannot overheat at junction between table and its back

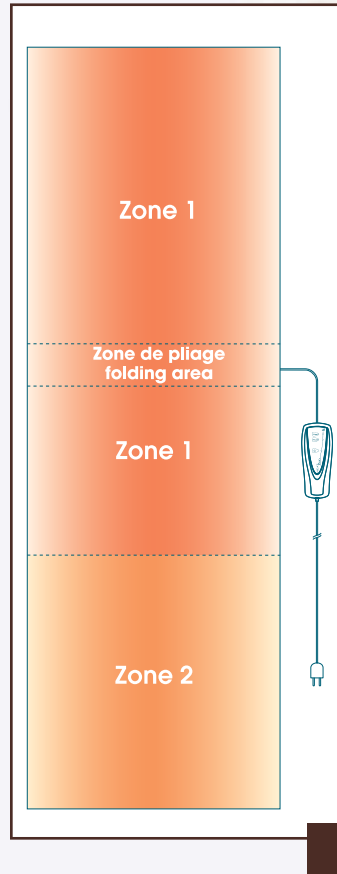

Technical data

- 2 sections :
 - Large section for back and thighs
 - Small section for legs
- 3 temperature settings for every of the 2 sections
- Folding dedicated zone for junction between table and its back
- 60' self-temporisation for safety
 - Bio-Prüf® treatment (hospital care quality)
 - Standard twin colour : white/white & chocolate/toffee
 - XL size : 1.80 x 0.59m
 - Voltage : 230 Vac or 115 Vac

Standards : EN 60335-1 & EN 60335-2-17

Distribué par / Distributed through

